



美容成分を届ける

MFIP[®]※ [エムエフアイビー]

特許取得 特許 第5872741号

MFIP[®]とは中周波断続パルスのことをいいます。断続的にウルトラパルスを送ることでよりエステティシヤンの行う指圧とタッピングのような体感が期待できます。


※Mid Frequency Interval Pulse 中周波断続パルス



新体感

MFIPの電気体感が回転。タッピングの速度が早く、新感覚トリートメントが体験できます。

ULTRA PULSE[®] [ウルトラパルス]

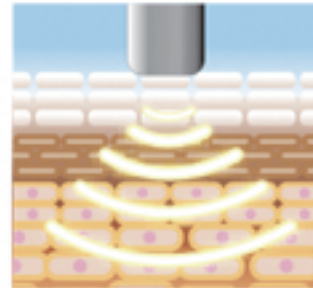

※イメージ図

インサートパルス※、EMS、中・高周波が4つの素子から同時に出力されます。

※インサートパルスは一切痛みのない電気パルスを与えることにより、お肌に塗布したエッセンスの美容液成分を補給しその効果を最大限に活かします。

光のトリートメント

LED

光の波長によるトリートメントで、元気な肌づくりをサポートします。

全灯



複数のお悩みをお持ちの方へ。

赤



年齢によるお肌の疲れを感じる方へ。

緑



肌ストレスや肌の色むらを感じる方へ。

青



ニキビトラブルや肌トラブル等を感じる方へ。

点滅LED

トリートメントの最終仕上げに使用することで、美容液の浸透サポートを行います。

肌をゆるめる

フェイスラインを整える

肌をあたためる

バイブレーションシステム

EMS

中・高周波

電気刺激が苦手な場合でも、バイブレーションの振動により電気刺激が緩和されます。

4極の素子間に微弱な交流電流が繰り返し流れ、マイクロウェーブを起こします。その優しいウェーブが表情筋に働きかけます。

お肌をじんわりとあたためます。お肌に負担のかからないよう、やさしい90kHzの中・高周波を採用。

ドクターアリーヴォ ザ ゼウス ご使用方法

MFIPモード
UPモード

トリートメント5分間を週1~2回ご使用ください。5分間トリートメントを行うことで想像以上の結果へと導きます。

EMSモード

毎日もしくは2日に1回、10分間EMSトリートメントを行うことでハリのある肌へと導きます。



1 アゴ下から耳の後ろまで動かし、その後、肩まで動かします。



2 直線を描くように、動かしていきます。



3 まゆ毛→生え際の順に動かします。

※トリートメント中はお肌が美容液(PE ザクイーン ゴールデンビューティー)で必ず濡れている状態で行ってください。



1 ●の位置で3秒ずつ順番にお肌に機械を当ててください。



2 ●の位置で3秒ずつ順番にこめかみに向かって当ててください。



3 ●の位置で3秒ずつ順番に眉から生え際に向かって当ててください。

※EMSモードの際は、専用ジェル(PE ザクイーン パーフェクトマッサージジェル)をご使用ください。